

BULLETIN D'INFORMATION

Septembre 2025

NOUVEAUX COUSSINS THÉRAPEUTIQUES À AIR PERFORMA CG AIR

INTRODUCTION

Le 8 septembre 2025, nous avons fièrement lancé le coussin thérapeutique Performa CG Air, la dernière évolution de notre technologie CG Air. Ce nouveau coussin offre les mêmes performances éprouvées auxquelles nos équipes et nos clients font confiance, tout en apportant des améliorations clés : une structure de cellules optimisée, davantage d'options de configuration des compartiments et de nouveaux choix de housses respirantes. Ces mises à jour offrent encore plus de confort, de stabilité et de protection de la peau, ce qui nous permet d'offrir de meilleurs résultats aux utilisateurs et une solution plus efficace à nos partenaires cliniques.

ANCIENNE CONCEPTION VS NOUVELLE CONCEPTION

Ancien CG Air

NOUVEAU Performa CG Air







NOUVEAUX COUSSINS PERFORMA CG AIR (suite)





Composant

Ancien CG Air

NOUVEAU Performa CG Air

Conception des cellules et matériau

- Matériau en PVC de qualité médicale (non allergène et antifongique)
- Matériau non poreux, résistant à la décoloration et aux odeurs
- Soudure haute fréquence et moulage par injection
- Conforme aux normes d'inflammabilité (CAL117-2013), non allergène
- PVC de qualité médicale, sans DINP, plus souple au toucher (non allergène et antifongique)
- Matériau non poreux, résistant à la décoloration et aux odeurs
- Paroi supérieure des cellules amincie de 15 % pour une meilleure immersion tout en conservant un soutien constant à la base
- Soudure haute fréquence et moulage par injection
- Conforme aux normes d'inflammabilité (CAL117-2013), non allergène
- Résiste à l'adhérence causée par les déversements séchés de suppléments nutritionnels

Options de compartiments et configurations du coussin

- Double valve permettant des options de positionnement latéral
- Dimensions et configurations de cellules personnalisées, profondeur asymétrique de l'assise
- Conception à double compartiment avec double valve : configurations gauche/droite ou avant/arrière pour un positionnement et une gestion de la pression personnalisés
- Dimensions et configurations de cellules personnalisées, profondeur asymétrique de l'assise

Base des cellules

Fiabilité et durabilité maintenues au niveau de la base des cellules

Fiabilité et durabilité maintenues au niveau de la base des cellules

Housses

- Housse standard à élasticité bidirectionnelle
- Housse en maille 3D
- Housse incontinence

- Nouvelles housses respirantes, pour un meilleur contrôle de la température et de l'humidité
- Tissu « spacer knit » à simple épaisseur avec élasticité 4 directions, offerte en standard.
- Option de tissu 3D « spacer knit » à double épaisseur avec élasticité 4 directions
- Housse incontinence
- Nouvelle option de technologie antidérapante (brevet en instance) :

GripZone – Prévient les forces de cisaillement au niveau des régions ischiatiques et coccygiennes grâce à un mince polymère antidérapant placé sous les fémurs et les trochanters.

- Aucune réduction de l'élasticité ni de la respirabilité du tissu
 - Conception sans couture



NOUVEAUX COUSSINS PERFORMA CG AIR (suite)

Avantages cliniques

- Gestion supérieure des pressions stimule la circulation et réduit les points de pression
- Stabilité posturale améliorée création d'un puits ischiatique et réduction de la migration pelvienne
- Prévient la bascule pelvienne postérieure
- Stabilité inégalée, efficace pour les utilisateurs propulsant avec les pieds
- Gestion supérieure des pressions stimule la circulation et réduit les points de pression
- Stabilité posturale renforcée puits ischiatique, réduction de la migration pelvienne.

Accessoires optionnels


Insert de contour anatomique -Améliore le soutien pelvien, l'immersion dans les zones sensibles et la stabilité latérale



Pochette pratique – Idéale pour un téléphone cellulaire et les articles essentiels, avec rabat magnétique facile à utiliser.



Treillis de transfert – Soutient le poids de l'utilisateur lors des transferts vers ou depuis le fauteuil, tout en protégeant les cellules avant vulnérables.

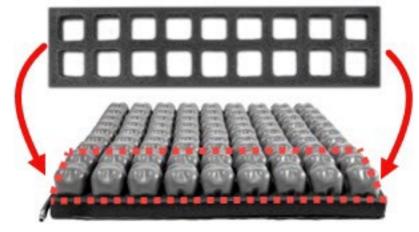



NOUVEAUX COUSSINS PERFORMA CG AIR (suite)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Disponibilité et prix

Le **Performa CG Air** est disponible dès maintenant.

La tarification est indiquée dans les formulaires de commande sur notre site Web.

Mises à jour

Tous les documents pertinents ont été mis à jour et sont en ligne.

Documents:

- Manuel de l'utilisateur
- Formulaires de commande
- Manuel des pièces
- Feuillet Performa CG Air
- Site Web

Vidéos :

Des vidéos de soutien technique ont été créées et seront mises en ligne prochainement.

- Réparation d'une déchirure à la base de la cellule
- Réparation d'une valve décollée
- Réparation d'une cellule percée par un objet pointu
- Réparation du coussin en retirant une cellule
- Réparation d'un trou dans une cellule