

NOUVEAUX COUSSINS THÉRAPEUTIQUES À AIR PERFORMA CG AIR

INTRODUCTION

En septembre 2025, nous avons fièrement lancé le coussin thérapeutique Performa CG Air, la dernière évolution de notre technologie CG Air. Ce nouveau coussin offre les mêmes performances éprouvées auxquelles les cliniciens et les utilisateurs font confiance, tout en intégrant des améliorations significatives : une structure de cellules souples optimisée, une plus grande flexibilité dans la configuration des compartiments, ainsi que de nouvelles options de housses respirantes. Ces mises à jour offrent encore plus de confort, de stabilité et de protection de la peau, ce qui nous permet d'offrir de meilleurs résultats aux utilisateurs et une solution plus efficace à nos partenaires cliniques.

ANCIENNE CONCEPTION VS NOUVELLE CONCEPTION

Ancien CG Air



NOUVEAU Performa CG Air




NOUVEAUX COUSSINS PERFORMA CG AIR (suite)


Composant	Ancien CG Air	NOUVEAU Performa CG Air
Conception des cellules et matériau	<ul style="list-style-type: none"> • Matériau en PVC de qualité médicale (non allergène et antifongique) • Matériau non poreux, résistant à la décoloration et aux odeurs, offrant une rétention d'air améliorée. • Soudure haute fréquence et moulage par injection • Conforme aux normes d'inflammabilité (CAL117-2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • PVC de qualité médicale, sans DINP, plus souple au toucher (non allergène et antifongique) • Matériau non poreux, résistant à la décoloration et aux odeurs, offrant une rétention d'air améliorée. • Paroi supérieure des cellules amincie de 15 % pour une meilleure immersion tout en conservant un soutien constant à la base • Soudure haute fréquence et moulage par injection • Conforme aux normes d'inflammabilité (CAL117-2013) • Résiste à l'adhérence causée par les déversements séchés de suppléments nutritionnels
Options de compartiments et configurations du coussin	<ul style="list-style-type: none"> • Double valve permettant des options de positionnement latéral • Dimensions et configurations de cellules personnalisées, profondeur asymétrique de l'assise 	<ul style="list-style-type: none"> • Conception à double compartiment : configurations gauche/droite ou avant/arrière pour un positionnement et une gestion de la pression personnalisés • Dimensions et configurations de cellules personnalisées, profondeur asymétrique de l'assise
Base des cellules	Fiabilité et durabilité maintenues au niveau de la base des cellules	Fiabilité et durabilité maintenues au niveau de la base des cellules
Housses	<ul style="list-style-type: none"> • Housse standard à élasticité bidirectionnelle • Housse en maille 3D • Housse incontinence 	<ul style="list-style-type: none"> • Nouvelles housses – respirantes, pour un meilleur contrôle de la température et de l'humidité • Tissu « <i>spacer knit</i> » à simple épaisseur avec élasticité 4 directions, offerte en standard. • Option de tissu 3D « <i>spacer knit</i> » à double épaisseur avec élasticité 4 directions • Housse incontinence • NOUVELLE option de technologie antidérapante (brevet en instance) : GripZone – Prévient les forces de cisaillement au niveau des régions ischiatiques et coccygiennes grâce à un mince polymère antidérapant placé sous les fémurs et les trochanters. <ul style="list-style-type: none"> ○ Aucune réduction de l'élasticité ni de la respirabilité du tissu ○ Conception sans couture
Avantages cliniques		<ul style="list-style-type: none"> • Prévient la bascule pelvienne postérieure • Stabilité inégalée, efficace pour les utilisateurs propulsant avec les pieds • Gestion supérieure des pressions : stimule la circulation et réduit les points de pression • Stabilité posturale renforcée : puits ischiatique, réduction de la migration pelvienne.

NOUVEAUX COUSSINS PERFORMA CG AIR (suite)**Accessoires optionnels****Insert de contour anatomique**


Améliore le soutien pelvien, l'immersion dans les zones sensibles et la stabilité latérale

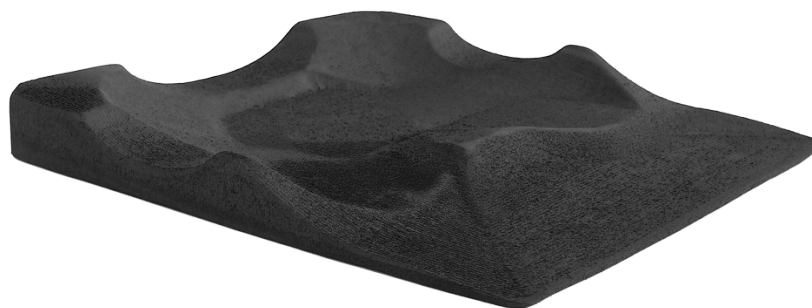**Pochette pratique**

Idéale pour un téléphone cellulaire et les articles essentiels, avec rabat magnétique facile à utiliser.

**Treillis de transfert**

Soutient le poids de l'utilisateur lors des transferts vers ou depuis le fauteuil, tout en protégeant les cellules avant vulnérables.

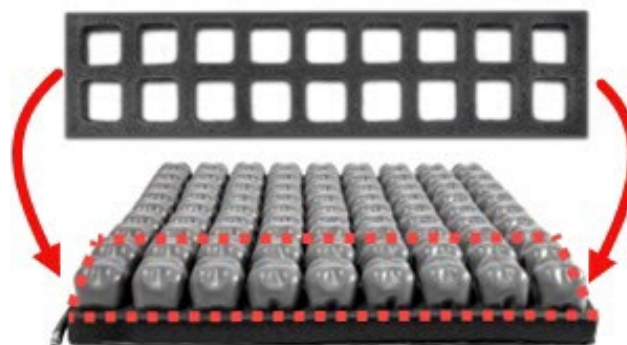

NOUVEAUX COUSSINS PERFORMA CG AIR (suite)**INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE****Disponibilité et prix**

La **Performa CG Air** est disponible dès maintenant, et les prix figurent dans les formulaires de commande **mis à jour** en ligne.

- Client du Québec : Le formulaire de commande Posture a été mis à jour pour inclure les nouveaux codes du Performa CG Air.
- Clients de l'Ontario : Les formulaires de commande de l'Ontario incluent les nouveaux codes ADP requis.

Mises à jour**Documents :**

Tous les documents pertinents ont été mis à jour et sont en ligne.

- [Site Web](#)
- [Manuel de l'utilisateur](#)
- [Formulaires de commande](#)
- [Manuel des pièces](#)
- [Feuille Performa CG Air](#)

Vidéos :

Des vidéos de soutien technique ont été créées et sont disponibles en ligne sous **Support / Espace pro / [Guides d'instructions – vidéos](#)**.

- Réparation d'une déchirure à la base de la cellule
- Réparation d'une valve décollée
- Réparation d'une cellule percée par un objet pointu