

## NOUVEAUX REPOSE-JAMBES « SIGNATURE »

### INTRODUCTION

Le 12 février 2024, nous lancerons les premiers composants de notre système de positionnement SP-202 Signature récemment redessiné. Ce lancement comprend des repose-jambes pivotants standard (STD), renforcés (HD) et pédiatriques et des repose-jambes élévateurs et compensateurs, à la fois manuels et motorisés.

Le tube rond traditionnel utilisé dans les versions précédentes a été remplacé par une extrusion d'aluminium propriétaire. En adoptant cette conception, nous avons réduit le poids des composants tout en offrant un réglage plus facile et continu ainsi qu'une plus grande durabilité, le tout dans un emballage plus élégant. Comme pour les modèles précédents, les repose-jambes manuels et motorisés sont constitués de la même potence que celle utilisée pour nos repose-pieds HD. Cela permet d'assurer la continuité des pièces et d'harmoniser les réglages sur l'ensemble de la gamme.

### ANCIEN MODÈLE VS NOUVEAU MODÈLE


#### HAUTEUR DE LA JAMBE\*

Repose-jambes

Ancien modèle

Nouveau modèle Signature

PÉDIATRIQUE

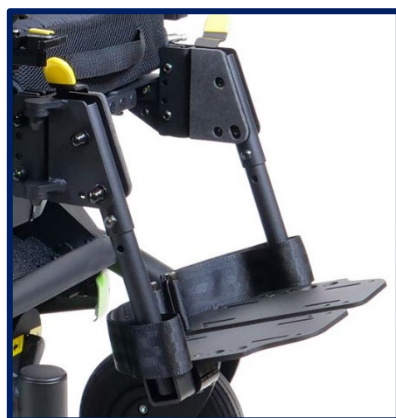

Plages des hauteurs<sup>1</sup>

<sup>2</sup>SOFLP5 : 140-190 mm (5½ – 7½ po)  
SOFLP8 : 125-255 mm (5 – 10 po)  
Ajustement aux intervalles de 1 po

<sup>2</sup>SOFLP5 : 125-255 mm (5 – 10 po)  
SOFLP5L : 125-305 mm (5 – 12 po)  
Ajustement en continu

1. Voir note 1 sur la page 3
2. Les mesures métriques sont arrondies aux 5 mm près.

**\*NOTE – Pour plus de précision sur la façon de procéder aux ajustements, consultez le Guide d'instruction publié en même temps que le Bulletin d'information.**

**Nouveau repose-jambes SIGNATURE (suite)**
**STANDARD  
Adulte**

**Plages des  
hauteurs<sup>1</sup>**

<sup>2</sup>SOFLA10 : 265-395 mm (10½ – 15½ po)  
SOFLA14 : 370-495 mm (14½ – 19½ po)

Ajustement était aux intervalles de 1 po

<sup>2</sup>SOFLA12 : 320-445 mm (12½ – 17½ po)  
SOFLA14 : 370-495 mm (14½ – 19½ po)

Ajustement aux intervalles de ½ po

**RENFORCÉ  
Adulte**

**Plages des  
hauteurs<sup>1</sup>**

SOFLHD12 : 320-395 mm (12½ – 15½ po)  
SOFLHD14 : 370-495 mm (14½ – 19½ po)

Ajustement était aux intervalles de 1 po

SOFLHD12 : 320-445 mm (12½ – 17½ po)  
SOFLHD14 : 370-495 mm (14½ – 19½ po)

Ajustement aux intervalles de ½ po

1. Voir note 1 sur la page 3

2. Les mesures métriques sont arrondies aux 5 mm près.

## Nouveau repose-jambes **SIGNATURE** (suite)

Repose-jambes  
élevateurs et  
compensateurs  
manuels et  
motorisés



Plages des  
hauteurs<sup>1</sup>

<sup>2</sup>SOFLHD12 : 320-395 mm (12½ – 15½ po)    <sup>2</sup>SOFLHD12 : 320-445 mm (12½ – 17½ po)  
SOFLHD14 : 370-495 mm (14½ – 19½ po)    SOFLHD14 : 370-495 mm (14½ – 19½ po)

Ajustement était aux intervalles de 1 po    Ajustement aux intervalles de ½ po

1. L'ajustement de la longueur des jambes pour tous les repose-jambes ADULTES se fait de la même façon et par intervalles inférieures que dans le modèle précédent. Les repose-jambes PÉDIATRIQUES s'ajustent différemment. Les nouveaux modèles présentent également un plus grand chevauchement entre les plages de réglage courtes et longues pour faciliter l'adaptation à la croissance et aux changements de positionnement.

2. Les mesures métriques sont arrondies aux 5 mm près.

## ANGLE DU GENOU\*

Repose-jambes  
**STANDARD** et  
**PÉDIATRIQUE**  
escamotables



Les repose-jambes standard et pédiatriques s'ajustent de la même façon et offrent des réglages pour adultes de 60° et 70° et des réglages pour pédiatriques de 60°, 70°, 80° et 90°.\*

**\*NOTE – Pour plus de précision sur la façon de procéder aux ajustements, consultez le Guide d'instruction publié en même temps que le Bulletin d'information.**

## Nouveau repose-jambes *SIGNATURE* (suite)

Repose-jambes  
**RENFORCÉ (HD)**  
escamotables  
et  
Repose-jambes  
élévateurs et  
compensateurs  
manuels et  
motorisés



Les repose-jambes renforcés et les repose-jambes élévateurs/compensateurs manuels/motorisés s'ajustent de la même façon et offrent des réglages de 60° et 70°.

### AVANTAGES DES REPOSE-JAMBES SIGNATURE

- Plus solide et plus résistant au pivotement
- Poids plus léger, jusqu'à 25 % de moins que le modèle précédent
- Ajustements plus faciles et plus précis
- Extrusion propriétaire plus élégante
- Tous les appui-mollets ont un ajustement en continu à l'intérieur d'une plage de 110 mm (4¼ po).
- Conception pédiatrique à monture haute

### INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

#### Disponibilité et prix

Les nouveaux repose-jambes Signature seront offerts sur tous les fauteuils roulants motorisés Alltrack à partir de lundi le 12 février 2024. Les prix sont indiqués sur les formulaires de commande.

#### Mises à jour correspondantes

Tous les documents pertinents ont été mis à jour et seront en ligne à partir du 12 février, avant la fin de la journée.

Ces documents sont les suivants :

- Manuels de l'utilisateur
- Formulaire de commande
- Manuel des pièces
- Brochure Alltrack
- Site Web
- Guide d'instruction